

GÜVENLİ HIJYEN ÇÖZÜMLERİ

2023 Ürün Katalođu

İsviçre

saniswiss
GÜVENLİ HIJYEN ÇÖZÜMLERİ



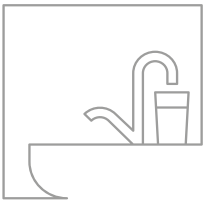
Sanitizer ASPIRATION

- + Temizlik, Dezenfeksiyon, Hoş Koku
- + Hoş ve Hafif Parfümlü
- + Köpürmez

Dental aspiratör sistemlerinin günlük temizliği ve bakımı için konsantre. Islak ve kuru emme sistemleriyle kullanılabilir. Köpürmeyen ve aşındırmayan formülasyonu, ekipmanların ilk günkü durumlarını korumalarını sağlar. Kullanım bakımından son derece ekonomiktir ve kullanım süresini uzatmak için emme sistemini temiz tutmaya yardımcı olur.

**VİRÜSİT**

012345678910

**YÜKSEK BAKIM**

Konsantre Temizleyici Dezenfektan, Koku Giderici

Tüm aspirasyon üniteleri ve amalgam separatörleri için eş zamanlı dezenfeksiyon, temizlik, koku giderme ve bakım için köpüksüz konsantre. Düşük uygulama konsantrasyonlarında, bakterilere, mayaya ve virüslere karşı geniş etki spektrumuna sahiptir.

Etki Alanı	Uyumlu Olduğu Standartlar
BAKTERİSİT %2 15 dak	EN 13727 EN 13697
FUNGİSİT %2 15 dak	EN 13727
MAYASİT %2 15 dak	EN 13697
TÜBERKÜLOSİT %2 60 dak	EN 14348
VİRÜSİT %2 15 dak	EN 14476 DVV/RKI zarflı virüsler (ör. HBV, HIV, HCV)

Teknik Veriler

Bileşimi: Dimetildioktilamonyum klorür, Dipropilen glikol, 2-Aminoetanol, Tetrasodyum etilen diamin tetraasetat, Etanol, Sitrik asit, Non-iyonik yüzey aktif maddesi Köpük önleyici, Boya.

Kullanım Talimatları: Günlük olarak 20ml ± 1ml konsantreyi 980 ml sıcak suya ekleyin (%2 çözelti). Yüksek ve düşük hacimli emme tüpleriyle aspire edin. Minimum 15 dakika beklettikten sonra (tam etkinlik elde etmek için 60 dakika boyunca bekletin) temiz suyla iyice durulayın. Alüminyum veya bakır parçalar kullanmayın. Sınıf IIb tıbbi cihaz.

Malzeme

Uyumluluğu

Her türlü dental aspiratör sistemleri için formüle edilmiştir. Köpüksüz formülasyonumuz amalgam separatörler de dahil çok sayıda malzemeye uyumludur.

Etkili

Salmonella, Legionella ve E-Coli de dahil Bakterilere, Mayaya, TB'ye, Mantara ve Hepatit B virüsü (HBV), Hepatit C virüsü (HCV) ve HIV gibi Virüslere karşı etkilidir.

Maksimum Seviyede Maliyet Etkin

Yüksek seviyede konsantre dezenfektan düşük konsantrasyonlarda etkilidir; 5 litrelik bidonlarıyla atığı azaltırken paranızın karşılığını tam olarak almanızı sağlar.

Ekonomik

Yalnızca %2'lik seyrelti oranıyla oldukça ekonomiktir; 1 litre konsantre 50 litre kullanıma hazır çözelti demektir. 5 litrelik ambalajda da mevcuttur.



1000 ml
132020

UTS Kodu:
7640140710341

Sanitizer INSTRUMENTS^E

- + Eşzamanlı Temizlik ve Dezenfeksiyon
- + 3 Enzim Teknolojisi
- + Hiperkonsantre %0,5

Yüksek performanslı temizleme gücüne sahip yeni 3 enzimli temizleyici dezenfektan. İyileştirilmiş antimikrobiyal etkinlik sağlarken çok çeşitli kirler üzerinde etkilidir. Ultrasonik banyo da dahil daldırma banyosu işleminde genel ve cerrahi aletlerin manüel temizliğine ve profilaktik dezenfeksiyonuna yönelik konsantre.



ENZİMLER
012345678910



ENZİMATİK

Hiperkonsantre %0,5 Enzimatik Temizleyici Dezenfektan

Sterilizasyondan önce temizlik ve dezenfeksiyon için tıbbi-cerrahi aletlerine ve endoskopi ekipmanlarına yönelik yeni 3 enzimli dezenfektan. Düşük uygulama konsantrasyonlarında, bakterilere, mayaya ve virüslere karşı geniş etki spektrumuna sahiptir. Çoğu patojende 5 dakikadan sonra etkilidir. 72 saate kadar ıslatmada alet bütünlüğünü garanti eder.

Etki Alanı	Uyumlu Olduğu Standartlar
BAKTERİSİT 5 dak.'dan itibaren %0,5	EN13727+A1* EN 14561*
MAYASİT 5 dak.'dan itibaren %0,5	EN 13624* EN 14562*
MİKROBAKTERİSİT 5 dak.'dan itibaren %0,5	EN 14348 (test bekleniyor) EN 14563 (test bekleniyor)
VİRÜSİT 5 dak.'dan itibaren %0,5	EN 14476* HBV'nin temsili PRV'si EN 14476+A1 HCV, HIV'nin temsili BVDV'si

* Kirli koşullar

Teknik Veriler

Bileşimi: n, n-didesil- n-metil- poli (oksietil) amonyum propionat, enzim kompleks (proteaz, amilaz ve mannanaz, kompleks yapıcı, yardımcı maddeler.

Kullanım Talimatları: Cerrahi aletler, ameliyathane ekipmanları, skoplar, oftalmolojik ekipmanlar ve kontaktoloji ekipmanları gibi invazif ve invazif olmayan cihazların ön dezenfeksiyonu için yalnızca profesyoneller tarafından kullanıma yöneliktir. Son kullanma tarihinde sonra kullanmayın. Şişeyi sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Banyoyu ön dezenfeksiyon için yalnızca bir kez kullanın. Banyoyu tekrar kullanmayın veya dönüştürmeyin. Diğer ürünlerle karıştırmayın. Tüm sorumluluk atık sahibinde olmak üzere, ürünü ve ambalajı tehlikeli atık olarak bertaraf edin. Kalıntıları kanalizasyona veya su yollarına atmayın. Paslanmaz çelik, alüminyum, HDPE, silikon, skop kılıfları, tungsten, viton, pirinç ve PVC ile uyumluluğa yönelik aşınma çalışmalarında test edilen materyallerle işlenmiş malzemelerin uyumluluğunu kontrol edin. Sınıf IIb tıbbi cihaz.

Eşzamanlı Temizlik ve Dezenfeksiyon

İşlem zamanından tasarruf etmek ve güncel kullanıcı koruması kurallarına uymak için ultrasonik banyoda temizlemek de dahil eş zamanlı olarak temizleyin ve dezenfekte edin.

3 Enzim Teknolojisi

3 enzime sahip enzimatik konsantremiz, aletlerin rutin manuel temizliği ve dezenfeksiyonu için kullanılabilir bir temizleyici dezenfektandır. Sterilizasyondan önce kirin ve biyofilmin parçalanmasını sağlarken çok çeşitli patojenler üzerinde etki gösterir.

Hiperkonsantre %0,5

Yüksek seviyede konsantre olan ürünümüz maliyet etkin kullanıma sahiptir (1 litre = 200 litre kullanıma hazır çözelti) ve tıbbi-cerrahi aletler ve endoskopların temizliğinde son derece güçlü ve hassastır.

72 Saat Islatma

Aşınma çalışmalarında uyumluluk bakımından test edilip onaylanan malzemeden yapılan aletler 72 saate kadar oldukça uzun bir süre herhangi bir aşınma olmaksızın çözeltide ıslatılabilir. Banyo stabilitesi: 8 saat (Veya gün).



1000 ml
132164

UTS Kodu:
7640140711065

Neden Tercih Etmelisiniz?

GÜVENLİ

Hidrojen Peroksit dezenfeksiyon açısından en çevre dostu etken maddelerden biridir. Kullanıldığında suda ve oksijende çözünerek aktif kalıntıya neden olan mikrobiyal direnç bırakmaz.

ZENGİN

Saniswiss geniş spektrumlu etkinliğe sahip stabil, güvenli ve etkili dezenfektanlar sunar. Saniswiss Sanitizer ürün grubu güçlendirilmiş Hidrojen Peroksit teknolojisi ve doğal katkı maddelerini kullanır.

UYUMLU

Saniswiss, MDR ve C. diff ile sporları da dahil olmak üzere çoğu patojeni etkin ve hızlı bir şekilde yok ederek uyumluluk gösterir ve kullanıcıların sağlıklı kalmasını sağlar. Saniswiss Sanitizer EN AB standartlarına uygundur.

AB ECOLABEL

Saniswiss Sanicleaner ürün grubu AB Ecolabel etiketine sahiptir. Ürün içerikleri herhangi bir tehlikeli madde içermez ve ürünler bitkisel kökenli olup %98'e kadar biyolojik olarak çözünebilir.

CLP İÇERMEZ

Sanitizer ürünlerimizden bazıları ve Sanicleaner ürünlerimizin hiçbiri CLP sembolü içermez ve bu da güvenli depolama sağlarken ürünlerin kullanıcı açısından güvenli olduğunu ve ilgili hiçbir riskin bulunmadığını garanti eder.

MALİYET ETKİN

Ürün grubumuz Uçucu Organik Bileşenler içermez ve hızlı bir şekilde buharlaşmaz. Mümkün olan her durumda konsantre formülasyonlara öncelik veririz.

Güvenli Hijyen Çözümleri

VİZYONUMUZ

12 yılı aşkın bir süredir, çevre, sağlık çalışanları ve hastalar için güvenli hijyen çözümleri üretiyoruz. Temiz ve çığır açan teknolojilerimiz sayesinde, etkinlik ve güvenlikten ödün vermeden geleceğin temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerini sunuyoruz.

BİLGİ BİRİKİMİMİZ

Cenevre'de kurulan şirket, global sağlık sektörünün en üst düzey paydaşlarıyla birlikte gelişmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve Biotech Valley'den oluşan benzersiz bir ekosistemle çevrelenen Saniswiss, en gelişmiş teknolojilerin gelecekte karşılaşılabilecek zorluklara uyumlu olmasını sağlamayı her zaman başarmıştır. "Özel Hasta Güvenliği Kuruluşu" (POPS) üyesi ve "Temiz Hastaneler" girişiminin kurucu üyesi olan Saniswiss, 83 ülkede hastane kaynaklı enfeksiyonlar, çapraz enfeksiyonlar ve sürdürülebilir hijyen alanlarında verilen mücadelede gerçek bir örnek teşkil etmiştir.

MARKAMIZ SAFE™

SAFE™, çevreye (en üst düzeyde biyolojik çözünebilirlik) ve kullanıcıların sağlığına (CLP tehlike sembolleri bulunmamaktadır) saygılı ürünler ve çözümler kullandığınızı garanti eder. SAFE™ ürünleri kullanmak sağlık hizmetleri sektöründeki "klasik kimyasal" ürünlerin kullanımının azalması için bir güvencedir. Temiz teknolojilerimiz sayesinde, sağlık çalışanlarını ve hastalarını korumak için en son teknoloji hijyen standartları sunmak üzere en yüksek etkinliği elde edersiniz.





saniswiss
GÜVENLİ HİJYEN ÇÖZÜMLERİ